



技工端 值得信赖的烧结设备专家

RELIABLE FURNACE EXPERT FOR LAB SIDE

深圳爱尔创口腔技术有限公司  
Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd

地址：广东省深圳市南山区高新园北区清华信息港B栋5层  
电话：0755-88820818 E-mail:services@upcera.com



# UPCERA HiFi 系列


满足您的技工所烧结需求



624 「烤瓷炉」



654 「烤铸一体炉」

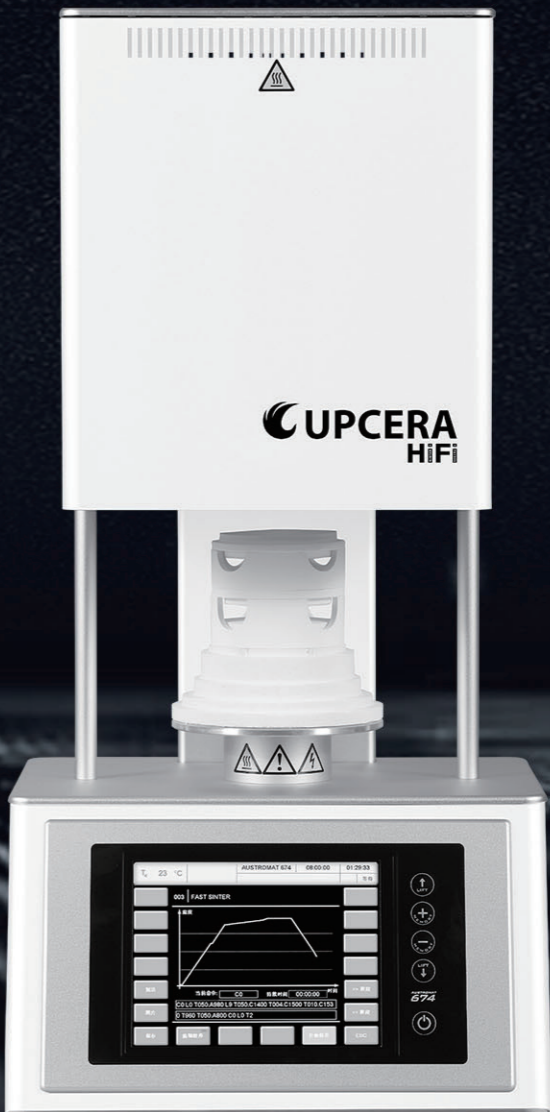

674 「氧化锆烧结炉」

UPCERA HiFi 系列

# 624「烤瓷炉」

直观操作系统  
定制专属保护程序

高  
精  
质

持  
久  
稳  
定



UPCERA HiFi 系列

# 654「烤铸一体炉」

全自动化压铸流程  
可多颜色同时压铸

独  
特  
包  
埋  
系  
统

产  
能  
最  
大  
化  
  
3  
一次可压铸  
种颜色



- ▮ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ▮ 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学致果
- ▮ 独特的炉膛设计, 可控温度范围内均可得到卓越的烧结效果
- ▮ 高品质的铂铑热电偶, 控温精确在0.5°C以内
- ▮ 可单独选择干燥位置
- ▮ 可变的真空启动温度, 不依赖于预热温度
- ▮ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间

- ▮ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ▮ 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学致果
- ▮ 多种自动压铸模式, 带来最佳的压铸效果
- ▮ 除所有常见包埋圈系统外, 在DEKEMA trixpress™ 包埋系统下, 可铸造瓷块重量高达20g
- ▮ 一次性可压铸三个不同颜色的瓷块, 使产能最大化
- ▮ 包埋圈表面均匀的热量分布, 带来令人惊艳的美学效果
- ▮ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间

UPCERA HiFi 系列

# 674「氧化锆烧结炉」

1小时超快烧结 高效多产

超快  
烧结

可容纳修复体  
80 颗





- 1小时超快烧结
- 独有的高温精密热电偶设计, 避免快速升温过程中温度过冲
- 可选双层托盘系统设计, 可容纳80颗修复体
- 高纯度硅碳棒加热元件, 可提供持久稳定的热量输出
- 炉膛烧结气氛稳定——无需空烧处理
- 断点续烧——立即启动后续程序
- 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间




# DEKEMA

## AUSTROMAT™

i 系列

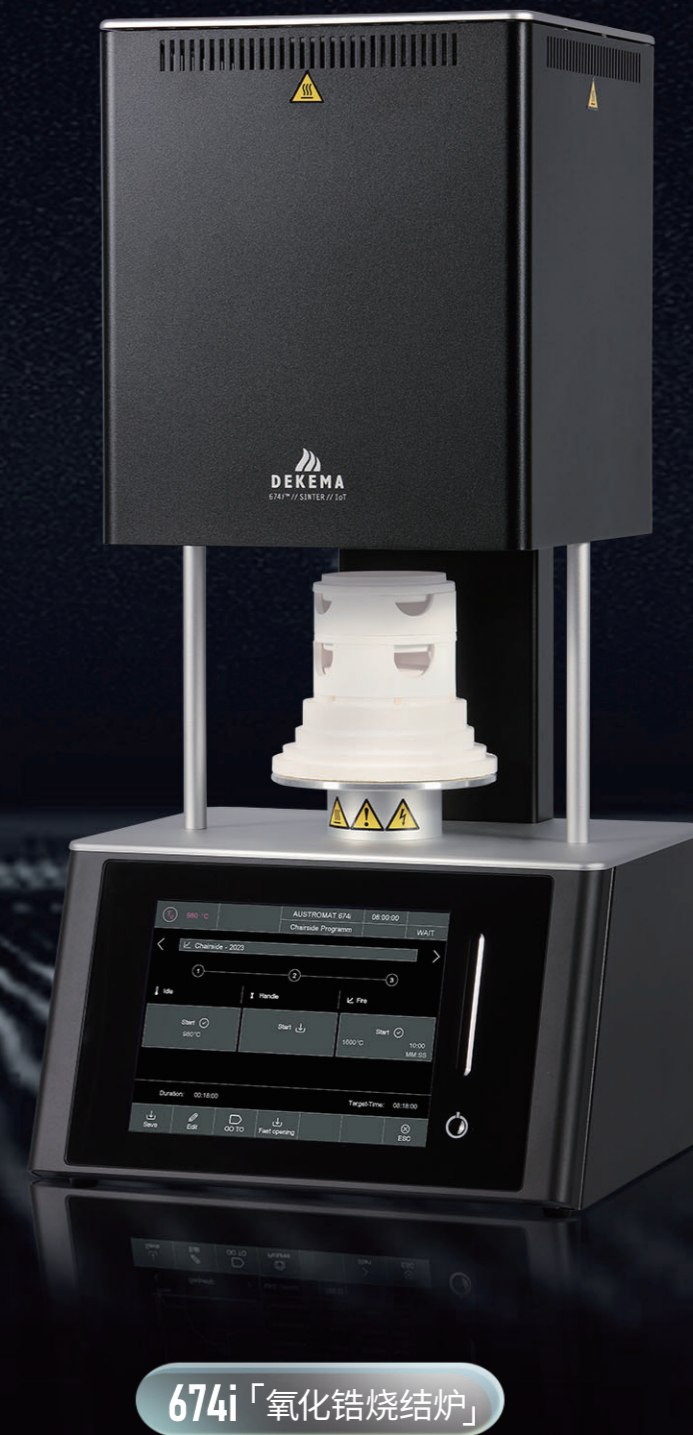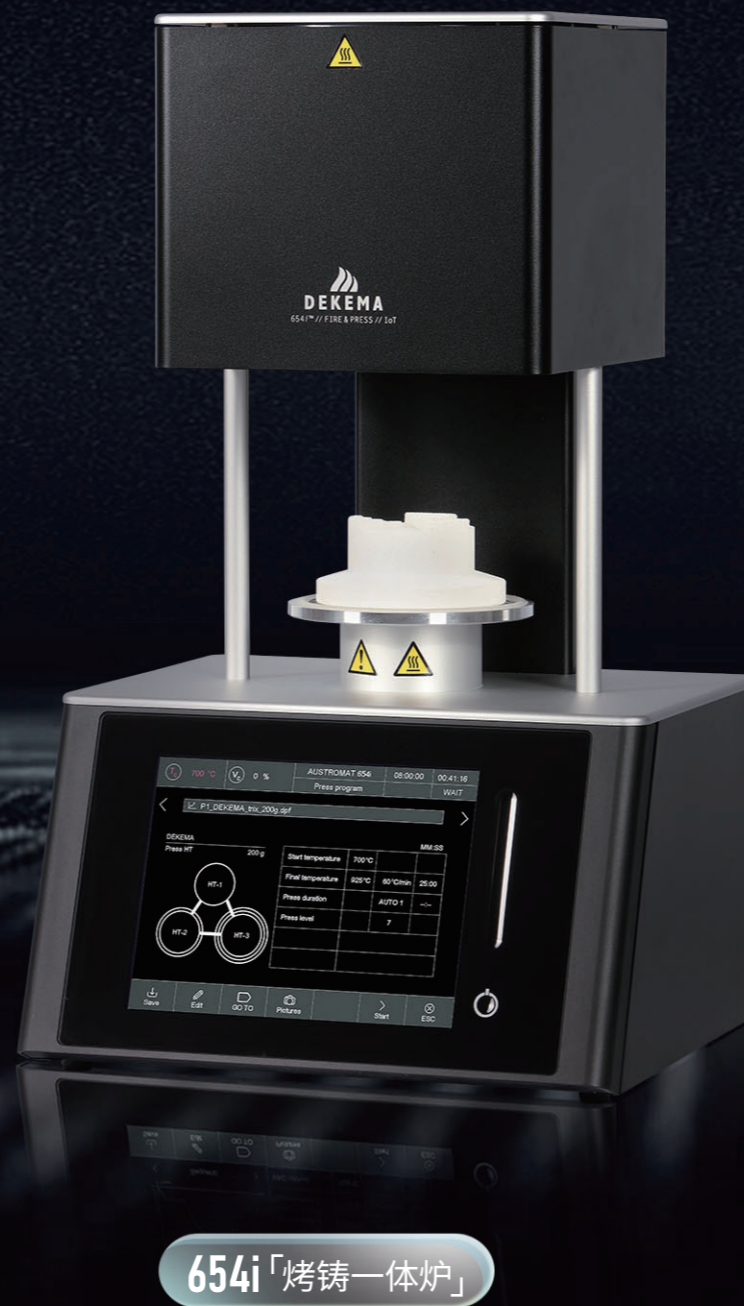

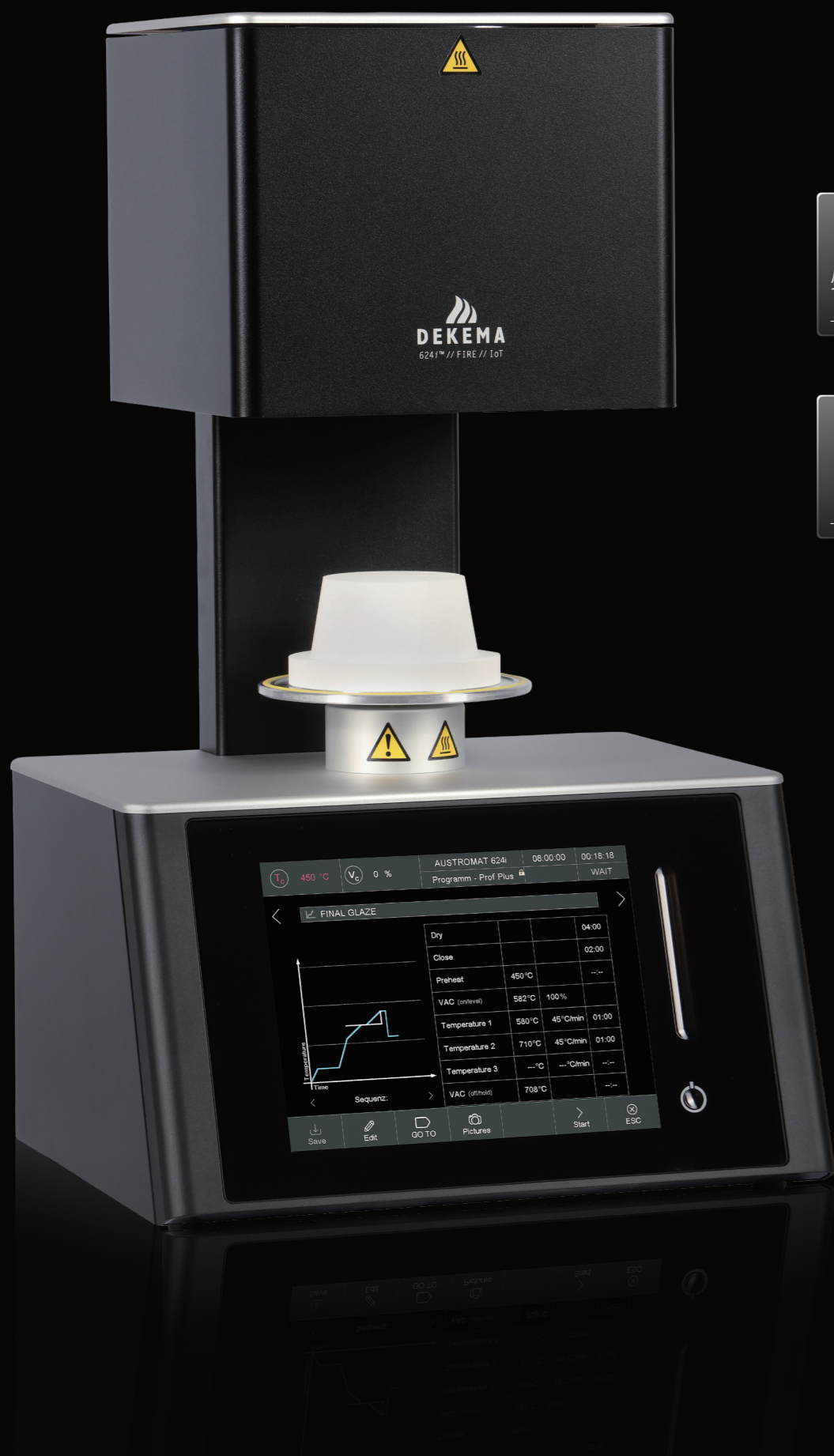

IoT  
物联网

升温  
精准


## AUSTROMAT™ 624i™

「烤瓷炉」

完美烤瓷效果  
经久耐用的德国品质

- ▮ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ▮ 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学致果
- ▮ 独特的炉膛设计, 可控温度范围内均可得到卓越的烧结效果
- ▮ 高品质的铂铑热电偶, 控温精确在0.5°C以内
- ▮ 可单独选择干燥位置
- ▮ 可变的真空启动温度, 不依赖于预热温度
- ▮ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- ▮ DEKEMA线上可获得各个牙科陶瓷材料生产商超过6万个烤瓷、铸瓷以及烧结程序

- ▮ IoT (物联网)
- ▮ 10.4英寸彩色触摸屏, 操作更快捷
- ▮ 云端DEKEMA Circle的数据管理

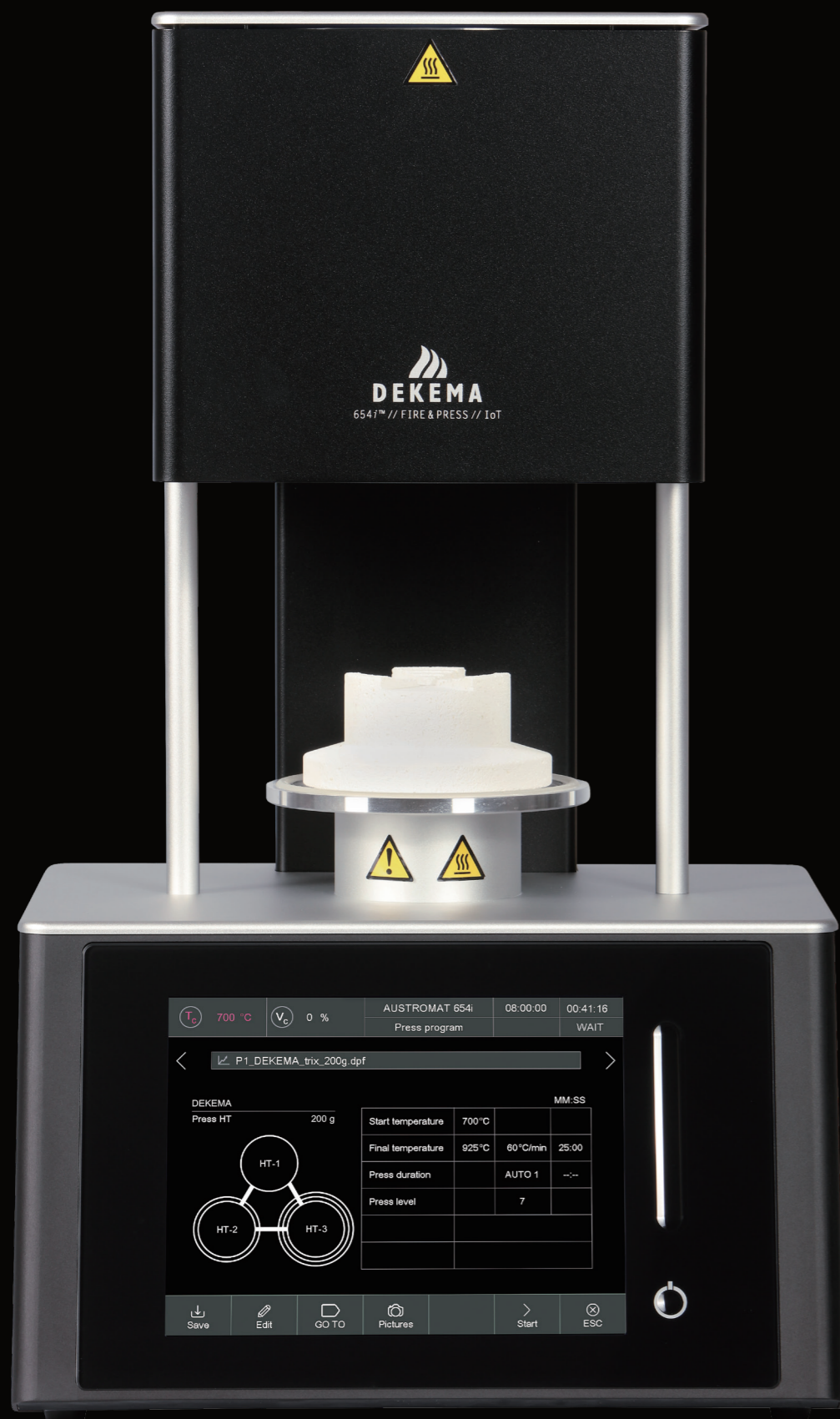

IoT  
物联网

独特包  
埋系统

# AUSTROMAT™ 654i™

「烤铸一体炉」

精准温度控制及开放烧结模式  
满足个性化需求

- ▮ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ▮ 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学致果
- ▮ 多种自动压铸模式, 带来最佳的压铸效果
- ▮ 除所有常见包埋圈系统外, 在DEKEMA trixpress™ 包埋系统下, 可铸造瓷块重量高达20g
- ▮ 一次性可压铸3个不同颜色的瓷块, 使产能最大化
- ▮ 包埋圈所有表面均保证热量分布均匀, 带来令人惊艳的美学效果
- ▮ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- ▮ DEKEMA线上可获得各个牙科陶瓷材料生产商超过6万个烤瓷、铸瓷以及烧结程序

- ▮ IoT (物联网)
- ▮ 10.4英寸彩色触摸屏, 操作更快捷
- ▮ 云端DEKEMA Circle的数据管理



IoT  
物联网

超快  
烧结

## AUSTROMAT™ 674i™

### 「氧化锆烧结炉」

高效烧结  
完美兼容全品类氧化锆让修复体更加美观

- 1小时超快烧结
- 独有的高温精密热电偶设计, 避免快速升温过程中温度过冲
- 可选双层托盘系统设计, 可容纳80颗修复体
- 高纯度硅碳棒加热元件, 可提供持久稳定的热量输出
- 炉膛烧结气氛稳定——无需空烧处理
- 断点续烧——立即启动后续程序
- 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- DEKEMA线上可获得各个牙科陶瓷材料生产商超过6万个烤瓷、铸瓷以及烧结程序

- IoT (物联网)
- 10.4英寸彩色触摸屏, 操作更快捷
- 云端DEKEMA Circle的数据管理